



**规格:** 8×10in, 10×12in, 11×14in, 12×15in, 14×14in, 14×17in.

**每盒数量:** 100 张

**每箱数量:** 5 盒

富明威 AX 医用 X 射线胶片，具有灰雾度低、反差高、感光快、分辨率高等特点。可以提供高清晰度和高透射率，对比强的照片。主要用于拍摄人体骨骼、胸腔等部位的普通型 X 射线胶片

**感蓝胶片有以下特性:**

优质诊断影像


感蓝只需要极少 X 光剂量，但仍然可以产生极度清晰、高反差的影像，有助于诊断更

加准确和简单。

蓝色调影像

感蓝胶片可以提供淡蓝色调影像，令诊断更为简单和准确。

感蓝片 特性曲线

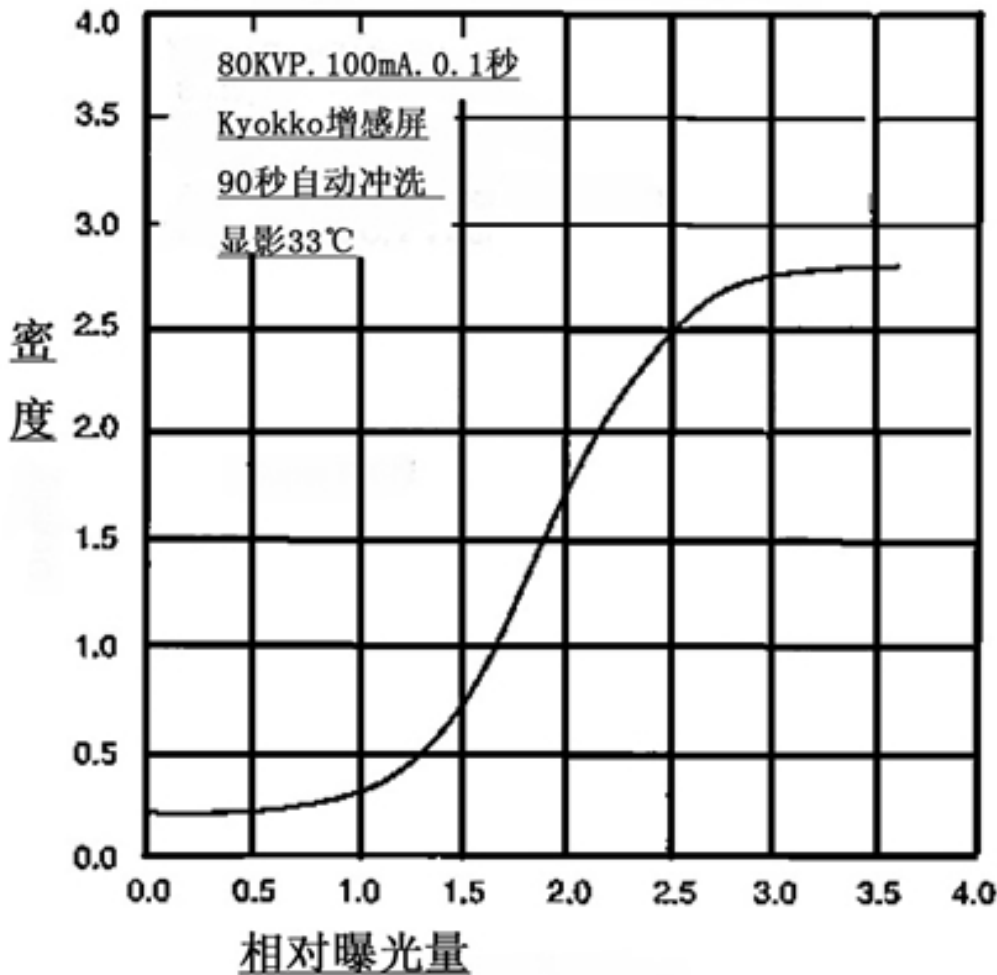

## AX 医用 X 射线胶片使用上注意：

### ● 使用

正确处理胶片，防潮、防晒、防热、防辐射及因压力对胶片造成的伤害。

### ● 储存

放在凉爽（温度 10℃~23℃），干燥（湿度 30%~60%）的地方储存。避免潮湿、高温以及一切不良气体。避免受 X 射线、伽玛射线及其他具有穿透力射线的影响。

### ● 安全灯

建议采用深红色滤色片套住 15 瓦磨砂灯泡，置于距胶片至少 1.2 米处。

### ● 自动冲洗

● 富明威 AX 医用 X 射线胶片适用于各种洗片机冲洗。

### ● 人工冲洗

● 该片可以高温机显或常温手显

## 市场报价表：

品名	规格	商标	单位	报价 (元/盒)	包装数量 (盒/箱)	备注
医用 X 光 (感蓝片 AX)	8×10in×100	富明威	盒	298	5	
	10×12in×100	富明威	盒	431	5	
	11×14in×100	富明威	盒	549	5	
	12×15in×100	富明威	盒	645	5	
	14×14in×100	富明威	盒	704	5	
	14×17in×100	富明威	盒	846	4	